


# EMS-массажер Muscle Shock Foot

## Инструкция

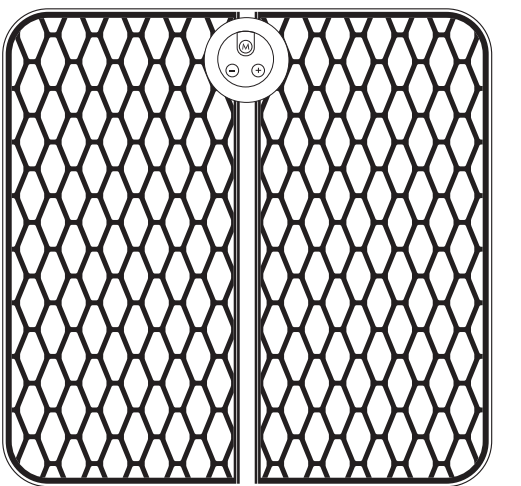

### Содержание и разъяснение символов


- Благодарим Вас за покупку массажера для ног нашей компании.
- Данный продукт проходит строгий контроль качества перед отправкой с предприятия. Вы можете не беспокоиться при его использовании.
- Во избежание неправильного использования, ведущего к повреждению или травмам, пользователи должны использовать продукт правильно, предпринимая все меры предосторожности для данного продукта.
- Пожалуйста, сохраните инструкцию по эксплуатации данного продукта.

Перечень и разъяснение символов.....	01
Содержание продукта/Спецификация и условия применения.....	02
Описание функций.....	03
Меры предосторожности и безопасности.....	04-05
Основные способы применения.....	06-07
Устранение неполадок.....	08

- Исключения**  
Наша компания не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате пожара, землетрясения, беспорядков, террористических атак и несчастных случаев, халатности, неправильного использования продукта и т.д.

Если продукт используется неправильно, степени поражения и повреждения обозначены соответственно следующими знаками.

Обозначает запрещенные действия	Обозначает вопросы, на которые следует обратить внимание	Указывает на инструкции, которым необходимо следовать

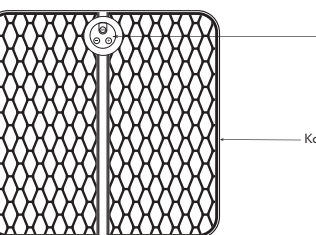

Модуль управления массажного устройства

Коврик для стоп


### Содержание продукта/Спецификация и условия применения

Наименование продукта	Массажер для ног		
Рабочее напряжение	3,7 В	Напряжение зарядного устройства	5В/DC
Вес модуля управления	14 г	Рабочий ток	20 мА
Емкость батареи	110 мАч	Питание	74 мВ
Тип батареи	Литий-полимерная батарея		
Размер накладки	328x318x2 мм		
Материал накладки	Силиконовая резина		
Дополнительное оборудование	Модуль управления—1 Накладка—1 Провод зарядного устройства—1 Инструкция по эксплуатации—1 Упаковочная коробка—1		

В целях повышения производительности продукта в некоторые спецификации могут быть внесены соответствующие изменения без дополнительного уведомления. Ознакомьтесь для полного понимания.


- Сведения о зарядке
- Входное напряжение зарядки этого продукта составляет 5В/DC. Для зарядки подключите зарядное устройство к интерфейсу зарядки контроллера.
- Время зарядки от разряженного до полностью заряженного состояния составляет около 40 минут. (Время зарядки зависит от разных адаптеров, USB и т. д.).
- Для зарядки этого продукта можно использовать зарядные станции ChargePal или зарядное устройство для телефона с четкой маркировкой выхода 5В/DC.
- При зарядке красный индикатор обычно горит, а после завершения зарядки индикатор гаснет.

### Описание функций

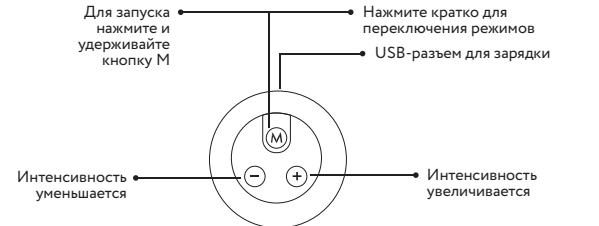

Интенсивность уменьшается

Интенсивность увеличивается

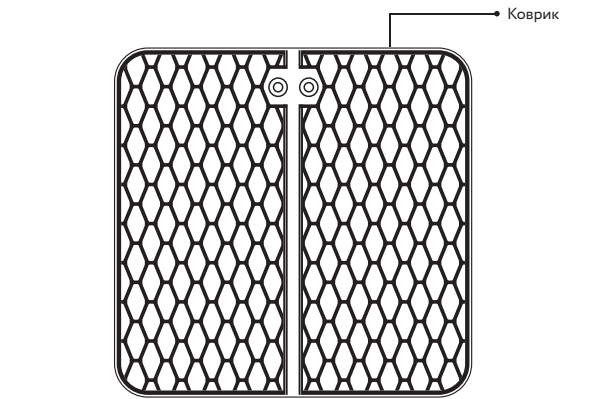

Коврик

### Меры предосторожности и безопасности

**Если приведенная ниже информация относится к Вам, прочтите ее прежде, чем обратиться за консультацией к своему врачу:**  
Пациенты, которые проходят лечение, имеют физические отклонения и страдают от каких-либо заболеваний.  
Пациенты со злокачественными опухолями.  
Женщины во время беременности и родов.  
Пациенты с пороком сердца, нарушением артериального давления / защемлениями черепного нерва.  
Пациенты с температурой выше 38 градусов Цельсия (стадия развития лихорадки), принимающие лекарства.  
Пациенты с инфекционными заболеваниями.  
Пациенты с нарушениями кожными восприятия или кожными патологиями.  
Пациенты с острыми заболеваниями.  
Пациенты, нуждающиеся в спокойном отдыхе для восстановления сил.  
Пациенты с аномальными кровотечениями.  
Пациенты с нарушением восприятия, возникшего в результате нарушения периферического кровообращения из-за диабета.  
Пациенты, имеющие аллергию на данный продукт.  
Другие (неизвестно), которые не подходят для использования этого продукта.

**Не используйте этот продукт на следующих участках, иначе это может привести к несчастным случаям или проблемам с кожей:**  
Периферические участки груди и сердца.  
Участки, на которых проводилась пластическая операция.  
Участки над шеей, голова и лицо и т. д.  
Участки с имплантированным металлом, пластиком и т.д.  
Участки слизистой оболочки, такие как раны, глаза, полость рта, интимные зоны.  
Участки позвоночника и участки кожи с татуировками.  
Участки, которые подверглись в этот день депиляции.  
Живот в физиологическом периоде.  
Люди, использующие кардиостимуляторы или другое имплантированное медицинское электронное оборудование.  
Люди, использующие аппарат искусственного сердца и легких и другое медицинское электронное оборудование для поддержания жизни.  
Люди, использующие сканер ЭКГ и другое носимое медицинское электронное оборудование.

### Меры предосторожности и безопасности

- Примечание: при использовании соблюдайте следующие меры предосторожности:
- Если необходимо заменить части во время использования, сначала выключите массажер.
  - Не ставьте стопы на разделительную линию во время использования.
  - Не ставьте продукт в среду с высокой температурой, влажностью и запыленностью.
  - Не используйте металлические материалы, например, ремни, подвески, браслеты, которые могут контактировать с накладкой во время использования.
  - Пожилые люди и люди, не способные позаботиться о себе, нуждаются в присмотре во время использования.
  - Этот продукт не следует использовать при вождении, во время сна, принятия ванны и т.д.
  - При появлении дискомфорта во время эксплуатации немедленно прекратите использование.
  - Храните вдали от детей.
  - Протрите массируемые подошвенные части влажной салфеткой или бумажным полотенцем перед началом использования, и убедитесь, что на ступнях отсутствуют повреждения.
  - Чрезмерное использование продукта может вызвать ожоги, в этом случае прекратите использование.
  - Запрещено использовать массажер во время зарядки.

### Основные способы применения

- Количество и интенсивность использования.  
Интенсивность 5 в полностью заряженном состоянии приведена в качестве примера. Вы можете использовать около 10 циклов (20 минут на цикл) для уменьшения интенсивности при сокращении времени работы батареи, и увеличения интенсивности при сокращении времени использования. Производительность батареи снижается в среде с низкими температурами, и количество применений становится меньше 10 (низкая температура по Цельсию).
- 1 Положите накладку в плоское положение.**
- Старайтесь не касаться пальцами сеточной поверхности накладки; Используйте накладку для плотного прилегания к коже. Если на стыке имеется расхождение, ток не может проходить через всю накладку, что может привести к колющей боли в локальном месте.
- 2 Подключите основное устройство к коврику для стоп**
- 3 Поставьте стопы, нажмите и удерживайте «М» для начала работы**
- 4 Нажмите «+/-» для настройки интенсивности**
- 5 Кратко нажмите «М» для переключения режимов, нажмите и удерживайте «М» для выключения**

### Основные способы применения

- 2 Интенсивность регулировки.**
- Интенсивность стимулирования имеет 15 уровней. По умолчанию при запуске используется уровень 1, а время по умолчанию — 20 минут. Нажмите и удерживайте кнопку «М» для включения устройства, загорится синий индикатор. Нажмите кнопку «+» снова, и индикатор начнет мигать. Каждый раз при нажатии для увеличения уровня 1; нажмите кнопку «-», каждый раз при нажатии уровень уменьшается на 1. При первом использовании установите меньшую интенсивность. Отрегулируйте силу после адаптации интенсивности; Когда оставшаяся мощность постепенно уменьшается, стимуляция током постепенно ослабевает. Продолжите использование после зарядки; Имеется 5 режимов упражнений. Для получения подробной информации см. руководство по режимам упражнений.
- 3 Выключение питания.**  
Чтобы отключить питание на промежуточном этапе, нажмите и удерживайте кнопку «М»; индикатор выключится и питание отключится.
- 4 Смена положения массажа.**  
Если во время работы ощущается слабая стимуляция, поможет перемещение стоп вверх или вниз на 1-2 см. Выключите питание перед тем, как сменить положение стоп.
- 5 Режимы постукивания:**
- Режим 1** Синий индикатор мигает 1 раз. Режим постукивания.
  - Режим 2** Синий индикатор мигает 2 раза. Режим разминания.
  - Режим 3** Синий индикатор мигает 3 раза. Режим Туйна.
  - Режим 4** Синий индикатор мигает 4 раза. Режим расслабления и лифтинга.
  - Режим 5** Синий индикатор мигает 5 раз. Режим массажа.
- 6** Нажмите и удерживайте кнопку «М» для запуска. Если после запуска накладка или кожа не чувствуются массажером, модуль управления автоматически выключится. Краткое нажатие на кнопку «М» переключает режимы. Если пользователи используют массажер для стоп в первый раз, они могут начать с автоматического режима

### Устранение неполадок

Проблема	Возможные причины	Решение
<b>Сбой при включении питания</b>	Низкий заряд батареи	Зарядите ее
<b>Нет стимуляции</b>	Низкая интенсивность	Нажмите на кнопку регулировки интенсивности Intensity Enhancement, пока не почувствуете стимуляцию
	Накладка неплотно прилегает к коже	Все накладки должны плотно прилегать к коже
	Проверьте способ прикрепления накладки	Убедитесь, что обе стопы стоят слева и справа на накладке
<b>Сильная стимуляция</b>	Высокая интенсивность	Нажмите на кнопку снижения интенсивности, чтобы уменьшить интенсивность
<b>Покраснение кожи и покалывание</b>	Накладка неплотно прилегает к коже	Все накладки должны плотно прилегать к коже. Если поверхность прилегания слишком маленькая, это приведет к покалыванию
<b>Стимуляция левой и правой накладки различаются</b>	Проверьте соединения накладки	Интенсивность воспринимается по-разному различными частями тела
	Одинакова ли интенсивность слева и справа	Осциллограмма силы накладки автоматически перемещается слева направо
<b>Прерывание стимуляции током</b>	Остаточное количество электроэнергии слишком мало, и питание отключено	Зарядите батарею

При появлении дискомфорта или проявлении аллергических реакций на силикон при неправильном использовании, немедленно прекратите использование.

Небольшое покраснение и зуд кожи после использования является нормальным.

Не разбирайте и не обслуживайте этот продукт самостоятельно.

Этот продукт не является медицинским оборудованием.


### Решения для Вашего отдыха и восстановления



POWER EYES  
МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ



POWER NECK  
МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ

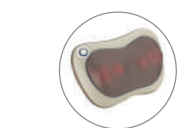

POWER BACK  
МАССАЖЕР ДЛЯ СПИНЫ



MUSCLE SHOCK BODY  
EMS-МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА



STRESS FREE  
МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА



POWER BODY  
МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА



POWER MOOD  
МАССАЖЕР ДЛЯ ГОЛОВЫ



POWER FOOT  
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ