



## МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ ASKONA POWER EYES

Руководство по эксплуатации

Askona Performance  
Restorative collection

www.askona.ru  
8 800 200 40 90

### Массажер для глаз Askona Power Eyes


Массажер Askona Power Eyes – специальная разработка для снятия напряжения в области глаз, а также отдыха и восстановления сил после напряженного дня. Беспроводной гаджет можно использовать дома и в поездках. Его удобно всегда держать в сумке, благодаря его компактному размеру.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССАЖЕРА

- Стимулирует кровообращение.
- Способствует снятию головной боли.
- Снимает напряжение с мышц, увеличивая их гибкость.
- Ускоряет процесс восстановления.


Обязательно ознакомьтесь с данным Руководством по эксплуатации перед началом использования Массажера.

#### Описание Askona Power Eyes

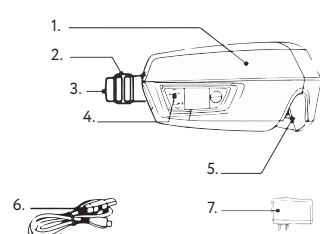

1. Корпус
2. Регулятор размера
3. Эластичная лента
4. Панель управления
5. Воздушная подушка
6. USB-провод для подзарядки и записи музыки
7. Адаптер

#### Панель управления

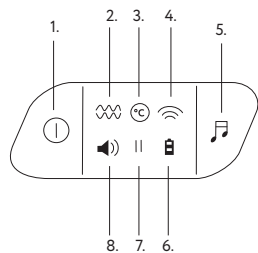

1. Кнопка включения устройства
2. Индикатор воздушно-компрессионного массажа
3. Индикатор согревающего режима
4. Индикатор мультиточечного вибромассажа
5. Кнопка управления музыкального воспроизведения
6. Индикатор аккумулятора
7. Индикатор воспроизведения музыки
8. Индикатор проигрывания музыки

### Меры предосторожности

1. Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом использования, если Вы:
  - Страдаете от глазных заболеваний, таких как глаукома, бельмо и отслойка сетчатки.
  - Страдаете от разного рода недомоганий и утомлений, а также от физических, умственных или психических нарушений.
  - Страдаете инсультом, гипертонией/гипотонией или заболеваниями сердца.
  - Страдаете от инфекционных заболеваний.
  - Страдаете от злокачественной опухоли.
  - Проходили в прошлом операции на глаза.
  - Обладаете диагнозом шизофрения.
  - Имеете открытые раны, порезы, покраснения, инфекции, ожоги и синяки на коже.
  - Беременны, находитесь в периоде менструации и непрекращающейся лихорадки.
  - Обладаете чувствительной кожей, ангиэктазией или были госпитализированы.
  - Обладаете низкой чувствительностью к изменению температур, максимальная температура согревающего режима – 42°C.
2. Не используйте Массажер во время вождения автомобиля.
3. Не разбирайте устройство самостоятельно. В случае необходимости обратитесь за помощью в сервисный центр.
4. Не используйте, не заряжайте, не храните устройство в жаркой или влажной среде, а также под прямыми лучами солнца во избежание поломок и неисправностей.
5. Не разрешайте детям или людям с ограниченными физическими возможностями использовать устройство без присмотра.
6. Не оставляйте Массажер под водой или в помещении, условия в которых способствуют образованию коррозии.
7. Немедленно прекратите использование устройства в случае обнаружения неисправностей.
8. Не роняйте и не ударяйте устройство.
9. Не располагайте тяжелые предметы на поверхности Массажера.
10. Массажер не заменяет лечения или рекомендаций врача. В случае возникновения вопросов – проконсультируйтесь с врачом.
11. Массажер не может быть использован в целях диагностики, лечения или других коммерческих целей.
12. Не пользуйтесь Массажером в процессе подзарядки устройства.

### Инструкция по использованию Массажера

#### ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Проверьте комплектность устройства и компонентов.
- Полностью зарядите Массажер.
- Обязательно снимите контактные линзы и очки для глаз.

Включайте Массажер только после того, как разместите его на глазах, чтобы не повредить воздушную подушку из-за избыточного давления. Не запускайте устройство, если питание и напряжение питания находятся вне допустимого диапазона, а также являются нестабильными.

#### КАК ЗАРЯДИТЬ УСТРОЙСТВО

1. Откройте крышку в боковой зоне для доступа к USB-порту. Используя USB-провод, соедините USB-порт и адаптер Массажера с розеткой.
2. Подключите зарядное устройство к розетке (100-240 В ~, 50/60 Гц). При подключении зарядного устройства голубым светом загорится светодиодный индикатор.
3. Для зарядки требуется 3 часа.

#### ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Разместите Массажер в области глаз.
2. Проверьте, чтобы Массажер плотно прилегал к поверхности лица, но не создавал неприятных ощущений. Вы можете регулировать плотность прилегания путем использования пражки на эластичной ленте.
3. Запустите устройство долгим нажатием на кнопку (1): При включении светодиодная панель загорится голубым светом. Режим массажа с согревающим эффектом и проигрыванием музыки запустится автоматически при включении.
4. Для завершения использования Массажера осуществите долгое нажатие на кнопку (1). Светодиодный индикатор погаснет.
5. Массажер автоматически приостанавливает работу через 15 минут. Для возобновления работы воспользуйтесь долгим нажатием на кнопку (1).

#### СПЕКТР ВОЗМОЖНЫХ РЕЖИМОВ МАССАЖА

1. Деликатный воздушно-компрессионный массаж.
2. Вибрационный массаж умеренной интенсивности.
3. Комплексный массаж, включающий в себя чередование воздушно-компрессионного и вибрационного массажа, дополненный легким согревающим эффектом.
4. Режим по умолчанию обеспечивает воздушно-компрессионный массаж с легким согревающим эффектом.

### Инструкция по использованию Массажера

#### КАК ВЫБРАТЬ ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЖИМ

1. Режим по умолчанию запускается долгим нажатием на кнопку включения при выключенном Массажере.
2. Вибрационный режим запускается одним коротким нажатием при запущенном режиме по умолчанию.
3. Комплексный массаж запускается двумя короткими нажатиями при запущенном Режиме по умолчанию.
4. Воздушно-компрессионный массаж запускается тремя короткими нажатиями при запущенном Режиме по умолчанию.

#### ФУНКЦИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ

Для запуска воспроизведения музыки следуйте указаниям:

1. Осуществите долгое нажатие на кнопку воспроизведения.
2. Для того, чтобы переключить мелодию, нажмите дважды на кнопку воспроизведения мелодий.

#### Устранение неисправностей

Ниже приведены случаи, с которыми Вы можете столкнуться при использовании Массажера. В случае, если данные рекомендации не обеспечили должный эффект или неприменимы, обратитесь в сервисный центр.

Вид	Возможная причина	Меры по устранению
Массажер не работает	Проверьте, включено ли устройство	Нажмите кнопку включения/выключения
	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите Массажер
Устройство не заряжается	Источник питания неправильно подключен	Отключите и снова подключите Массажер к источнику питания
Мигает светодиодный индикатор	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите Массажер

### Очистка и уход

#### ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Выключите Массажер и отсоедините USB-провод;
- Храните в сухом прохладном месте. Не храните устройство в подвешенном виде.

#### ОЧИСТКА

- Протирайте Массажер мягкими и сухими тканевыми салфетками. Не используйте воду для чистки устройства.
- Не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, мебельные полироли или их растворы.

#### Технические характеристики продукта

Наименование: Массажер для шеи Askona Power Eyes  
Литиевая батарея: 1300 мА<sup>ч</sup>  
Напряжение: 5В  
Габариты: 250x140x130 мм  
Мощность: 5 Вт


### Решения для Вашего отдыха и восстановления



ASKONA STRESS FREE  
МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА



ASKONA MUSCLE SHOCK  
EMS-МАССАЖЕР

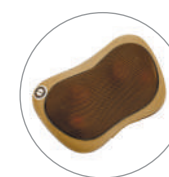

ASKONA POWER BACK  
МАССАЖЕР ДЛЯ СПИНЫ



ASKONA POWER NECK  
МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ